

LOMBOGIB® UNDERWEAR



6532/6655/6664/6663

FR | Notice d'utilisation

EN | Instructions for Use

IT | Istruzioni per l'uso

DE | Gebrauchsanweisung

SV | Bruksanvisning

NO | Bruksanvisning

DA | Brugsanvisning

FI | Käyttöohjeet

PL | Instrukcja użytkowania

FR

LOMBOGIB® UNDERWEAR

Si vous avez le moindre doute concernant les applications et l'utilisation de ce dispositif médical, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin et/ou orthopédiste-orthésiste, pharmacien ou conseiller orthopédique.

INDICATIONS

Pour les affections des lombaires pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Douleurs musculaires lombaires (Lumbago).
- Sciatique.
- Lésions lombosacrées.
- Douleurs lombaires chroniques.

PERFORMANCE :

Le dispositif offre une restriction de mouvement de la colonne lombaire. Le dispositif réduit les contraintes sur les lombaires lors des mouvements de flexion et d'extension.

CONTRE-INDICATION :

Le dispositif ne doit pas être utilisé chez les personnes pour qui la compression est contre-indiquée.

AVERTISSEMENT • PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Les patients souffrant de faiblesse du plancher pelvien doivent consulter leur médecin avant d'utiliser l'orthèse. L'orthèse ne doit pas être placée au contact direct d'une peau lésée. Ne pas porter pendant des périodes prolongées sans suivi médical. Cette orthèse est un dispositif à utiliser sur un seul patient. Ne pas réutiliser sur plusieurs patients. Si le moindre problème survient pendant l'utilisation de cette orthèse, retirer le dispositif et contacter votre médecin. Si le moindre incident grave survient, en lien avec le dispositif, le professionnel de santé et/ou le patient doit le signaler au fabricant et à l'autorité compétente dans le pays concerné. Le sevrage devra être progressif avec association éventuelle de rééducation fonctionnelle.

CARACTERISTIQUES DU DISPOSITIF :

Le dispositif est une ceinture de soutien lombaire élastique et comportant quatre baleines dorsales disposées en forme de V. Les passe-doigts ergonomiques facilitent la mise en place.

MISE EN PLACE :

Un essaiage est obligatoire pour une adaptation correcte et une bonne compréhension de la mise en place. La première mise en place sera effectuée par un professionnel de santé et ultérieurement par l'utilisateur ou une personne de son entourage selon le même protocole. Lors de l'essaiage, l'appliqueur devra conformer le baleinage en V de l'orthèse pour l'adapter à votre morphologie.

- La ceinture sera portée sous les vêtements ou sur un sous-vêtement.
- 1) Positionner le bas de la ceinture sur le haut du sillon inter-fessier
- 2) Centrer le baleinage dorsal de part et d'autre de la colonne vertébrale. Le logo Gibaud doit se trouver sur le côté droit.
- 3) Adapter le serrage en fonction de l'intensité douloureuse et de l'activité pour obtenir un serrage ferme mais confortable.

ENTRETIEN, CONSERVATION ET ELIMINATION

Conserver à l'abri d'une source de chaleur excessive (radiateur, sèche-linge...). Lavage doux à 30 ° C (à la main ou en machine programme délicat); rincer abondamment ; essorer doucement ; ne pas blanchir ; sécher à plat, ne pas sécher en machine ; ne pas repasser ; ne pas nettoyer à sec. Jeter le dispositif et son emballage conformément à la réglementation locale ou nationale en matière d'environnement.



PRISE DE MESURE ET TABLEAU DES TAILLES

Le dispositif existe en deux hauteurs : 21 cm (6662/6663) & 26 cm (6532/6655) Taille à choisir en fonction de la circonférence de la taille (en cm), mesurée 2 cm au-dessus des crêtes iliaques (en cm)

	0	1	2	3	4	5
	70-80 cm	80-90 cm	90-100 cm	100-110 cm	110-125 cm	125-140 cm

EN

LOMBOGIB® UNDERWEAR

If you have any doubts regarding the applications and use of this medical device, do not hesitate to ask your doctor and / or fitter, pharmacist, orthotist, or orthopedic consultant for advice.

INDICATIONS

Lower back conditions that may benefit from gross motion restriction, such as:

- Muscular low back pain.
- Sciatica.
- Lumbosacral strains.
- Chronic low back pain.

PERFORMANCE

The device provides lumbar spine gross motion restriction. The device reduces stress on the low back in flexion and extension

CONTRAINDICATION

Must not be used by individuals for whom compression is contraindicated.

WARNING • PRECAUTION OF USE

Patients suffering from pelvic floor weakness should consult with their medical professional before using the orthosis. The orthosis must not be used in direct contact with a damaged skin. Do not wear for extended periods without medical follow-up. The orthosis is a single patient use device. Do not use for multiple patients.

If any problems occur with the use of the orthosis, e.g. pain or appearance of local signs, remove the orthosis and contact your healthcare professional. The user and/or patient must report any serious incident that has occurred in relation to the device to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established. Gradual withdrawal possibly combined with functional physiotherapy.

FEATURES AND BENEFITS

The device is a lumbar stretchable belt featuring four V-shaped posterior stays. Ergonomic finger loops facilitate installation.

SET UP AND OPERATION

The first trial should be carried out by a qualified expert to understand the correct fitting and how to put the device on properly. Subsequently, the product should be put on the patient in the same way by the user, a family member or a friend.

- The belt is worn under the clothes or over the undergarments.

- 1) Position the bottom of the belt on the top of gluteal cleft.
- 2) Centre the dorsal rib on either side of the spinal column. The Gibaud logo must be on the right.
- 3) Tighten the belt based on the intensity of the pain and type of activity, to obtain a tighten firm but comfortable.

CARE INSTRUCTION, MAINTENANCE AND DISPOSAL

- Keep the belt away from direct heat sources (radiators, dryers...). 30°C mild fine wash (Hand wash or machine wash, mild process); rinse thoroughly. Wring out gently; do not bleach; dry flat, do not tumble dry; do not iron; do not dry clean. The device and packaging must be disposed of in accordance with respective local or national environmental regulations



MEASUREMENT AND SIZE CHART

The device is available in two heights: 21 cm (6662/6663) & 26 cm (6532/6655) The size is to choose in accordance with the waist circumference, measured 2 cm above the iliac crests (in cm)

	0	1	2	3	4	5
	70-80 cm	80-90 cm	90-100 cm	100-110 cm	110-125 cm	125-140 cm

IT

LOMBOGIB® UNDERWEAR

Per qualsiasi dubbio sull'applicazione e sull'utilizzo di questo dispositivo medicale, chiedere consiglio al proprio medico curante e/o all'ortopedico/tecnico ortopedico, farmacista o consulente ortopedico.

INDICAZIONI

Per le affezioni dei lombari che possono beneficiare di una limitazione di movimento, in particolare nei seguenti casi:

- Dolori muscolari lombari (Lombalgia).
- Sciatica.
- Lesioni lombosacrali.
- Dolori lombari cronici.

FUNZIONE DEL DISPOSITIVO

Il dispositivo offre una limitazione di movimento della colonna lombare. Il dispositivo riduce le limitazioni sui lombari al momento del movimento di flessione ed estensione.

CONTROINDICAZIONI

Il dispositivo non deve essere utilizzato da soggetti per cui è controindicata la compressione.

AVVERTENZA • PRECAUZIONI D'USO

I pazienti che soffrono di debolezza del piano pelvico devono consultare il proprio medico curante prima di utilizzare l'ortesi.

L'ortesi non deve essere posizionata a diretto contatto con eventuale cute lesionata. Non indossare per periodi prolungati senza prescrizione medica. Questa ortesi è un dispositivo da utilizzare su un unico paziente. Non riutilizzare su più pazienti. Per eventuali problemi durante l'utilizzo di questa ortesi, rimuovere il dispositivo e contattare il proprio medico curante. In caso eventuali incidenti gravi correlati al dispositivo, il professionista sanitario e/o il paziente deve segnalarlo al produttore e all'autorità competente nel paese interessato. Abbandonare l'uso dell'ortesi in modo progressivo, eventualmente abbinando una riabilitazione funzionale.

PRESA DELLE MISURE E TABELLA DELLE TAGLIE

Il dispositivo è disponibile in due altezze: 21 cm (6662/6663) & 26 cm (6532/6655) La taglia dell'ortesi deve essere scelta in base alla circonferenza della vita, misurata 2 cm al di sopra delle creste iliache (in cm)

	0	1	2	3	4	5
	70-80 cm	80-90 cm	90-100 cm	100-110 cm	110-125 cm	125-140 cm

DE

LOMBOGIB® UNDERWEAR

Wenden Sie sich bei Zweifeln in Bezug auf die Anwendung und den Gebrauch dieses medizinischen Geräts an Ihren Arzt und/oder Orthopäden/Orthopädietechniker, Apotheker oder orthopädischen Berater.

INDIKATIONEN

Bei Beschwerden im Lendenwirbelbereich, für die eine Ruhigstellung in Frage kommt, namentlich in folgenden

Fällen:

- Muskelschmerzen im Lendenwirbelbereich (Lumbago).
- Ischias.
- Lumbosakrale Läsionen.
- Chronische Schmerzen im Lendenwirbelbereich.

LEISTUNGSMERKMALE

Das Gerät ermöglicht eine Ruhigstellung der Lendenwirbelsäule. Das Gerät reduziert die Belastung der Lendenwirbel bei Beuge- und Streckbewegungen.

KONTRAINDIKATIONEN

Das Gerät darf nicht bei Personen verwendet werden, bei denen eine Kompression kontraindiziert ist.

VORSICHTSMASSNAHME • SICHERHEITSHINWEISE

Patienten mit einer Beckenbodenschwäche müssen vor der Verwendung der Orthese ihren Arzt konsultieren. Die Orthese darf verletzte Haut nicht unmittelbar berühren. Ohne medizinische Betreuung nicht über längere Zeiträume tragen. Diese Orthese ist der Verwendung für einen einzelnen Patienten vorbehalten. Nicht bei anderen Patienten wieder verwenden. Sollte bei der Verwendung dieser Orthese das geringste Probleme auftreten, entfernen Sie das Gerät und wenden Sie sich an Ihren Arzt. Bei geringsten Anzeichen eines ernsthaften Zwischenfalls im Zusammenhang mit dem Gerät muss das medizinische Fachpersonal und/oder der Patient dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde des betreffenden Landes melden.

PRISE DE MESURE ET TABLEAU DES TAILLES

Das Gerät ist in zwei Höhen erhältlich: 21 cm (6662/6663) & 26 cm (6532/6655) Die Größe der Orthese muss entsprechend dem Taillenumfang, der 2 cm über den Beckenkämmen (in cm) gemessen wird, gewählt werden.

	0	1	2	3	4	5
	70-80 cm	80-90 cm	90-100 cm	100-110 cm	110-125 cm	125-140 cm

SV

LOMBOGIB® UNDERWEAR

Om det råder minsta tvivel om hur man ska bära eller använda denna medicintekniska produkt ta genast kontakt med läkare och/eller ortosspecialist/ ortoped, apotekare eller ortopedisk rådgivare.

INDIKATIONER

För besvär i ländryggen med behov av begränsning av rörelserna, i synnerhet i följande fall:

- Muskelsmärter i ländryggen (lumbago).
- Ischias.
- Skador i länd- och/eller korsrygg.
- Kroniska ländryggssmärter.

UTFÖRANDE

Den medicintekniska enheten begränsar rörelserna i ländryggraden. Enheten reducerar påfrestning på ländryggen då man böjer eller sträcker på ryggen.

KONTRAIKATIONER

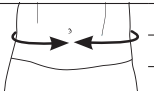
Enheten får inte användas av personer för vilka kompression är kontraindicerad.

VARNING • ANVÄNDNINGSRÅD

Patienter med svagt bäckenbotten måste konsultera en läkare innan de använder ortosen. Ortosen får inte placeras i direktkontakt med skadad hud. Bär den inte under längre perioder utan medicinsk uppföljning. Denna ortos får endast användas av en patient. Återanvänd inte på flera patienter. Om minsta problem uppstår när du använder denna ortos, avlägsna enheten och kontakta din läkare. Om en allvarlig händelse inträffar som är kopplad till enheten måste sjukvårdspersonalen och/eller patienten signalera detta till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i det aktuella landet. Användningen måste ske progressivt och eventuellt tillsammans med anpassad sjukgymnastik.

MÄTNING OCH STORLEKSTABELL

Enheten finns i två höjder: 21 cm (6662/6663) & 26 cm (6532/6655) Ortosens storlek väljs beroende på midjans omkrets, mät 2 cm ovanför höftbenskammen (i cm)

	0	1	2	3	4	5
	70-80 cm	80-90 cm	90-100 cm	100-110 cm	110-125 cm	125-140 cm

NO

LOMBOGIB® UNDERWEAR

Hvis du er i tvil om hvordan du setter på og bruker dette medisinske utstyret, kan du be legen og/eller ortopedtekniker, apotekeren eller en ortopedisk rådgiver.

INDIKASJONER

For korsryggproblemer som kan ha nytte av en begrensnig av bevegelsen, særlig i følgende tilfeller:

- Muskelsmerter i korsryggen (lumbago).
- Isjias.
- Lumbosakrale skader.
- Kroniske korsryggssmerter.

YTELSE

Dette utstyret begrenser korsryggsøylen bevegelse. Utstyret reduserer belastningen i korsryggen ved fleksjon og ekstensjon.

KONTRAIKASJON

Utstyret skal ikke brukes av personer som frarådes kompresjon.

ADVARSEL • FORHOLDSREGLER VED BRUK

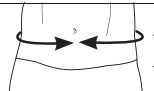
Pasienter som lider av svakhet i bekkenbunnen, må rådføre seg med lege før de tar i bruk ortosen. Ortosen skal ikke plasseres i direkte berøring med sårflater. Skal ikke brukes over lengre perioder uten legetilsyn.

Denne ortosen er et utstyr som kun skal brukes på én pasient. Den skal ikke brukes igjen på andre pasienter. Hvis det oppstår problemer i løpet av bruken av denne ortosen, fjern utstyret og kontakt lege.

Hvis det oppstår alvorlige hendelser i tilknytning til utstyret, skal helsepersonellet og/eller pasienten melde fra om dette til produsenten og til landets kompetente myndighet. Bruken av støttebeltet kan avsluttes gradvis eventuelt sammen med funksjonell trening.

MÅLTAKING OG STØRRELSESTABELL

Utstyret finnes i to høyder: 21 cm (6662/6663) & 26 cm (6532/6655) Ortosens størrelse skal velges i forhold til midjemålet målt 2 cm over hofteskammen på tarmbenet (i cm)

	0	1	2	3	4	5
	70-80 cm	80-90 cm	90-100 cm	100-110 cm	110-125 cm	125-140 cm

UTSTYRETS EGENSKAPER

Utstyret er et elastisk belte som gir støtte til korsryggen og som har fire spiler i ryggen med V-form. De ergonomiske fingersløyfene forenkler plasseringen.

PASSERING

Det er absolutt nødvendig å prøve utstyret for å oppnå korrekt tilpasning og god forståelse av plasseringen. Første gangs passering skal utføres av helsepersonell og etterpå av brukeren eller et familiemedlem etter samme prosedyre. Ved prøvingen skal den personen som tilpasser støtten, forme de V-formede spilene i ortosen for å tilpasse den til din morfologi. - Beltet brukes under klærne eller over undertøyet.

1) Plasser beltets nedre del øverst på rumpesprekken. 2) Sentrer ryggspilene på begge sidene av ryggsoylen. Gibaud-logoen skal være på høyre side. 3) Tilpass strammingen i forhold til smertenivået for å oppnå en fast men behagelig stramming.

VEDLIKEHOLD, OPPBEVARING OG KASSERING

Oppbevares på avstand fra sterke varmekilder (panelovn, tørketrommel, osv.). Skånsom vask på 30 °C (for hånd eller i maskin på skånsomt program); skyld med rikelig vann; vri forsiktig; må ikke blekes; tørkes liggende, skal ikke tørkes i tørketrommel; må ikke strykes; må ikke tørrenses. Utstyret og emballasjen kasseres i henhold til stedlig eller nasjonal lovgivning.



DA

LOMBOGIB® UNDERWEAR

Hvis du er det mindste i tvivl om anvendelsen og bruken af denne medicinske anordning, så spørg endelig din læge og/eller ortopæd, apoteker eller ortopædiske rådgiver til råds.

INDIKATIONER

Til lumbale lidelser hvor bevægelsesbegrænsning er velgørende, især i følgende tilfælde:

- Smertor i lændemuskler (lumbago).
- Iskias.
- Alaselân-sakrale kvæstelser.
- Kroniske lændesmerter.

VIRKNING

Anordningen begrænser lændehvirvlerne bevegelsesområde. Anordningen reducerer belastningen på lænden under bøj- og strækbævegeleer.

KONTRA-INDIKATION

Anordningen må ikke anvendes hos personer for hvem sammenpresning er kontraindikeret.

ADVARSEL • FORSIGTIGHEDSREGLER FOR BRUG

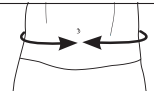
Patienter, der lider af svaghe i bækknbunden, skal rådføres sig med deres læge før brug af ortosen. Ortosen må ikke placeres i direkte kontakt med beskadt hud. Må ikke anvendes i længere tid uden lægeligt tilsyn.

Denne ortose er en anordning til brug på kun én og samme patient. Må ikke genbruges på flere patienter. Hvis der opstår mindre problemer under brug af denne ortose, skal du tage den af og kontakte din læge. Hvis der opstår den mindste alvorlige hændelse i forbindelse med denne anordning, skal lægen/ sundhedspersonen og/eller patienten signalere dette til producenten og kompetent myndighed i det pågældende land.

Afvænnigen skal være gradvis eventuelt kombineret med genoptræning.

MÅLTAGNING OG STØRRELSESSKEMA

Anordningen findes i to højder: 21 cm (6662/6663) & 26 cm (6532/6655) Ortosens størrelse skal vælges ud fra taljemålet, målt 2 cm oven over hoftekanten (i cm)

	0	1	2	3	4	5
	70-80 cm	80-90 cm	90-100 cm	100-110 cm	110-125 cm	125-140 cm

FI

LOMBOGIB® UNDERWEAR

Mikäli olet epävarma tämän terveydenhuollon laitteen käyttötarkoituksista ja käytöstä, älä epäi kysyä neuvoa omalta lääkäriltä ja/tai ortopediltä, proteesihoitajalta, proviisorilta tai ortopedia-alan terveydenhoitajalta.

KÄYTTÖAIHEET

Alaselân vaivoihin, joiden yhteydessä liikkuvuuden rajoittamisesta voi olla hyötyä, erityisesti seuraavissa tapauksissa:

- Alaselân lihaskivut (noidannuoli).
- Iskias.
- Lanne-ristirankavammat.
- Krooniset alaselân kivut.

VAIKUTUS

Laitte rajoittaa lannerangan liikkettä. Laitte vähentää alaselkään kohdistuvia rasituksia fleksio- ja ekstensioliikkeiden aikana.

VASTA-AIHE

Laitetta ei saa käyttää henkilöillä, joilla kompressio on vasta-aiheinen.

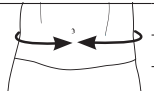
VAROITUS • KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROTOIMET

Potilaiden, joiden lantionpohja on heikko, on kysyttävä lääkäriltään neuvoa ennen ortoosin käyttöä. Ortoosia ei saa asettaa suoraan kosketukseen vaurioituneen ihon kanssa. Ei saa käyttää pitkiä aikoja ilman lääkietieellistä seurantaa. Tämä ortoosi on tarkoitettu yhden potilaan käyttöön. Sitä ei saa käyttää useilla potilailla. Mikäli ortoosin käytön aikana ilmenee pienikin ongelma, poista laite ja ota yhteyttä omaan lääkäriin. Mikäli ilmenee vakava laitteeseen liittyvä vaaratilanne, terveydenalan ammattilaisen ja/tai potilaan on ilmoitettava siitä valmistajalle ja kyseisen maan toimivaltaiselle viranomaiselle. Käyttö on lopetettava vähitellen ja yhdistämällä siihen mahdollisesti toiminnallista kuntoutusta.



MITTAAMINEN JA KOKOTAILUKKO

Laitetta on saatavana kahden korkuisena: 21 cm (6662/6663) & 26 cm (6532/6655) Ortoosin koko on valittava 2 cm istuinkyhmyjen yläpuolelta mitatun vyötärönym-päryksen mukaan (cm)

	0	1	2	3	4	5
	70-80 cm	80-90 cm	90-100 cm	100-110 cm	110-125 cm	125-140 cm

PL

LOMBOGIB® UNDERWEAR

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zastosowania i użycia tego wyrobu medycznego, należy zasięgnąć porady lekarza i/lub ortopedy-specjalisty od ortez, farmaceuty lub doradcy ortopedycznego.

WSKAZANIA

W przypadku schorzeń okolicy lędźwiowej, które mogą powodować ograniczenie ruchu, takich jak:

- Bóle w odcinku lędźwiowo-krzyżowym (Lumbago).
- Rwa kulszowa.
- Zmiany w okolicy lędźwiowo-krzyżowej.
- Przewlekłe bóle w odcinku lędźwiowym.

WYTRZYMAŁOŚĆ

Orteza zapewnia ograniczenie ruchu kręgosłupa na odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Zmniejsza nacisk na kręgi lędźwiowe podczas ruchów zginających i prostujących.

PRZECIWSKAZANIE

Ortezy nie należy używać u osób z przeciwwskazaniem do kompresji.

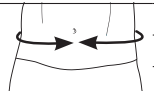
OSTRZEŻENIE • ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Pacjenci ze słabym dnem miednicy powinni skonsultować się z lekarzem przed użyciem ortozy. Orteza nie powinna mieć bezpośredniego kontaktu z uszkodzoną skórą. Nie nosić przez dłuższy czas bez nadzoru medycznego. Orteza jest wyrobem przeznaczonym do stosowania przez jednego pacjenta. Nie używać ponownie u innych pacjentów.

W razie jakichkolwiek problemów w trakcie korzystania z ortozy, należy ją zdjąć i skontaktować się z lekarzem. W przypadku jakiegokolwiek poważnego incydentu związanego z wyrobem pracownik służby zdrowia i/lub pacjent muszą zgłosić to producentowi i właściwemu organowi w danym kraju. Zaprzesztanie używania ortozy należy wykonywać stopniowo, łącząc je w razie potrzeby z rehabilitacją.

PRISE DE MESURE ET TABLEAU DES TAILLES

Wyrób dostępny jest w dwóch wysokościach: 21 cm (6662/6663) & 26 cm (6532/6655). Rozmiar ortozy należy dobrać na podstawie obwodu w pasie, zmierzzonego 2 cm powyżej grzebienia biodrowego (w cm)

	0	1	2	3	4	5
	70-80 cm	80-90 cm	90-100 cm	100-110 cm	110-125 cm	125-140 cm

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Orteza jest elastycznym pasem zapewniającym stabilizację lędźwiową, wyposażonym w system czterech pasów ułożonych w kształcie litery V. Ergonomiczne uchwyty na palce ułatwiają zakładanie.

ZAKŁADANIE

Przymierzenie jest obowiązkowe dla właściwego dopasowania i zrozumienia sposobu zakładania. Pierwsze założenie zostanie przeprowadzone przez pracownika służby zdrowia, a kolejne w ten sam sposób przez użytkownika lub osobę z jego otoczenia. W trakcie przymierzania osoba zakładająca musi wstępnie uformować system stulek w kształcie litery V, aby dopasować go do budowy ciała pacjenta. - Pas należy nosić pod ubraniem lub na bieliznie. 1) Ułożyć dolną część pasa w górnej części okolicy pośladkowej. 2) Wyśrodkować stąłki grzbietowe po obu stronach kręgosłupa. Logo Gibaud powinno się znajdować z prawej strony. 3) Dopasować zamocowanie do intensywności bólu i aktywności, aby zapewnić solidną, a jednocześnie wygodną stabilizację.

KONSERWACJA, PRZECZCHOWYWANIE I USUWANIE

Przechowywać z dala od nadmiernego ciepła (grzejnik, suszarka itd.). Prac w 30°C (ręcznie lub w delikatnym programie); dokładnie spłukać; wykręcać delikatnie; nie wybielać; suszyć na płasko, nie suszyć w suszarce bębnowej; nie prasować; nie czyścić chemicznie. Usuwać wyrób wraz z opakowaniem zgodnie z lokalnymi lub krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

