

La femme Finesse collant ou bas classe 2 :  
Elasthanne, Polyamide.

# GIBAUD

TISSEURS DE SOIN



## SOIN DES JAMBES

La femme  
FINESSE

Collant ou bas de compression  
médicale pour la femme

**GIBAUD**  
TISSEURS DE SOIN

**GIBAUD**

# GIBAUD

TISSEURS DE SOIN

**INDICATIONS**  
CLASSE 2 : 20,1 à 27 hPa (15,1 à 20 mmHg)  
Pour les affections des jambes pouvant bénéficier d'une thérapie par compression, notamment dans les cas suivants :  
• Post-opératoire & Post-sclérothérapie de veines variqueuses; diamètre veineux > 3 mm (C2);  
• Symptômes veineux (douleur, inconfort, crampes) liés à la grossesse;  
• Situations qui perturbent l'hémodynamique veineuse (vois longs, station debout prolongée, sport).

**CONTRE-INDICATIONS**  
Le dispositif médical ne doit pas être porté par des personnes pour lesquelles la compression est contre-indiquée :  
• Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6;  
• Pilegmosia centrala dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle);  
• Thrombose/Phlébite septique;  
• Neuropathies et troubles de la sensibilité périphérique;  
• Insuffisance cardiaque décompensée;  
• Microangiopathie diabétique évoluée.

Voir précautions d'emploi et conseils d'entretien à l'intérieur du pack

À METTRE DÈS LE MATIN AU LEVER  
Voir mise en place et enfilage à l'intérieur du pack



Bas avec silicone : pour un bon usage des bas avec antigelisse silicone, il est recommandé de les laver tous les jours afin de préserver les qualités d'adhérence du silicone.

**CONSEILS D'ENTRETIEN ET D'ÉLIMINATION DU DISPOSITIF**  
Lavage machine en programme délicat jusqu'à 40°C, sans adoucissant. Pas de lavage à sec ni de repassage. Séchage à plat loin d'une source de chaleur (ni radiateur ni sèche-linge).

Jeter le dispositif et son emballage conformément à la réglementation locale ou nationale en matière d'environnement.

Si le moindre incident grave survient en lien avec le dispositif, l'utilisateur et/ou le patient doivent le signaler au fabricant et à l'autorité compétente dans le pays concerné.

#### AVERTISSEMENTS

Le dispositif ne doit pas être placé en contact direct avec une lésion cutanée.

Si le moindre problème survient pendant l'utilisation de ce dispositif, par exemple une

douleur ou l'apparition de symptômes locaux, retirer le dispositif et contacter votre médecin.


Ce dispositif ne doit être utilisé que sur un seul patient. Ne pas réutiliser sur plusieurs

patients.

Si le moindre incident grave survient en lien avec le dispositif, l'utilisateur et/ou le patient

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**  
Si le moindre problème survient lors de l'application de ce dispositif, contactez votre médecin. En cas de réclamation, merci de renvoyer le produit dans son emballage.

conception *Forma* / *Forma* design

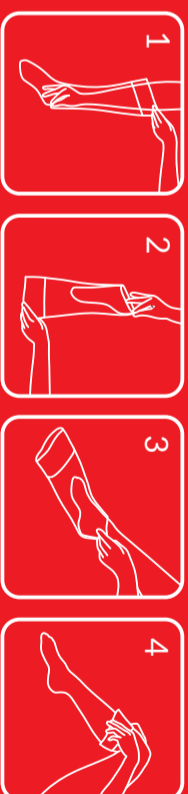

1 et 2 - Retourner le produit sur lui-même en pinçant le talon.  
3 - Enfiler le pied jusqu'au talon en veillant à ce que celui-ci soit bien en place.

4 - Dérouler régulièrement le produit le long de la jambe en ajustant sans tirer, par des mouvements légers de droite à gauche afin d'éviter la formation de plis.  
Masser la jambe de bas en haut pour aider le textile à se mettre en place et gommer les éventuels plis.

#### À METTRE DÈS LE MATIN AU LEVER

#### MISE EN PLACE

Pour faciliter la mise en place, nous vous conseillons d'enfiler le produit sur une peau bien sèche.